




TePe Implant Care™

Уникалната извита шийка на четката Implant Care позволява лесен достъп до повърхността към езика и небцето на имплантите. Малката глава на четката с дълги влакна улеснява достигането под протезната конструкция. Implant Care е подходяща и за вдадени навътре зъби, ортодонтични апарати за езика и други трудно достижими зони.

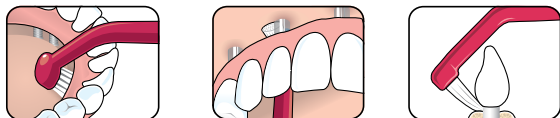


Повърхност към езика и небцето на имплантите.



TePe Implant/Orthodontic Brush

Дългата изтънена шийка с изключително тясна глава прави тази четка идеална за почистване на страните на бузите на имплантите и около ортодонтичните апарати.

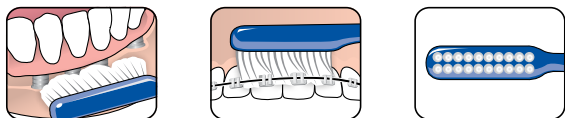


Повърхност откъм зъбите на импланта.

Ортодонтични апарати.

Изключително тясна глава на четката за подобрен достъп.



НОВО

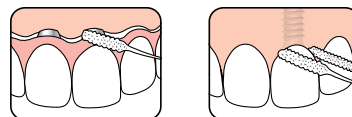

Мост, поддържан от имплант.

Отделен имплант.

Твърда пластмасова нишка.

Гъбест влакнест конец.


Конец за мостове & импланти TePe

Конец от гъбесто влакно, предназначен за лесно и ефикасно почистване на импланти, мостове и ортодонтични апарати. Подходящ и за пародонтална грижа. Този конец е снабден с твърди пластмасови краища за лесно поставяне.




TePe Compact Tuft™


Малка извита глава на четката с гъст и заоблен сноп влакна. Идеална за прецизно почистване на зони, нуждаещи се от специално внимание.

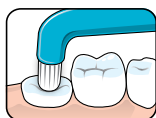


Пробиващи зъби.

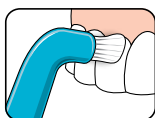


Покрай линията на венеча.

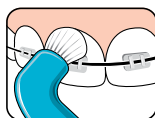


Ортодонтични апарати.

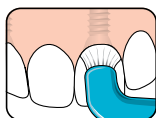

Отделен имплант.

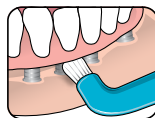

Мост, поддържан от имплант.

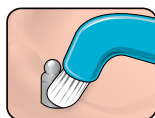


Прикрепващи елементи за цели протези.




TePe Interspace™

Извита четка с остър сноп влакна за почистване на трудно достъпните повърхности. Три вида текстура на влакната и махаща се глава на четката.

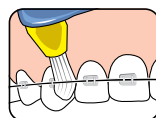


Ортодонтични апарати.

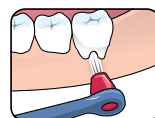


Фуркации.




Дисталната повърхност на последния зъб.

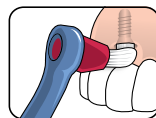

Отделен имплант.

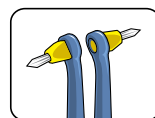

Главата може да се прикрепя към двете страни на четката за различни ъгли.

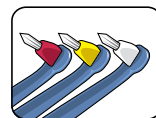

Червено: изключително мека
Жълто: мека
Бяло: средна



TePe Special Care™

Special Care с 12 000 изключително меки влакна се препоръчва след операции в устната кухина и за пациенти с изключително раздразнена и нежна тъкан в устата. Два размера на главата на четката: нормален (червено), компактен (синьо).

Употреба:

- След операции в устната кухина
- При раздразнена тъкан в устата
- След травма
- При афти и херпеси
- При лъчетерапия



TePe Gentle Care™

Gentle Care е със свръх меки влакна, но малко по-твърди от Special Care. Нормална глава на четката.

Употреба:

- След операции в устната кухина
- Раздразнена тъкан в устата
- Суха уста
- Чувствителна повърхност на корена
- След изobelване



TePe Tongue Cleaner

Повечето случаи на лош дъх са причинени от бактерии по езика. Отстраняването на бактериите с четка за почистване на езика спомага предотвратяването на лош дъх и подобрява здравето на устата. Дизайнът на TePe Tongue Cleaner съответства на естествената форма на езика.


Това намалява рефлекс на гадене и позволява да се достигне лесно по-навътре в устата. Три почистващи повърхности за ефикасно отстраняване на бактериите. Произведено от рециклируем полипропилен.

- Предотвратява лошия дъх
- Отстранява бактериите с едно движение
- Може да се почиства в съдомиялна машина



TePe Extra Grip

Допълнителният аксесоар за захващане помага на пациенти с намалени възможности на ръцете. Предоставя удобно и стабилно захващане, а тежи само 30 грама. Пригоден за повечето четки за зъби и специални четки TePe.

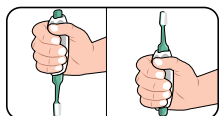


Поставете/ извадете четката като натиснете дръжката например върху маса.

TePe Extra Grip е разработена в сътрудничество с квалифицирани терапевти в Центъра за техническа помощ, Департамент по ревматология и Департамент по хирургия на ръцете към Университетска болница в Skåne, Швеция.




TePe Denture Brush

Тази четка за протези има изключително дълги здрави влакна за добър достъп и ефикасно почистване. Четката е проектирана с цел да прилича на конвенционална четка за зъби.

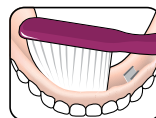

Ефикасно почистване на протезите.

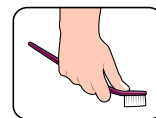

Дръжката може да се огъне назад за по-добро захващане.